

SEANCE 7

Comment administrer une injection de Sayana Press ?



Objectifs de la formation


- Préparer l'Uniject pour l'injection.
- Identifier les trois sites d'injection appropriés.
- Administrer correctement une injection de Sayana Press.
- Suivre les méthodes de manipulation sûres.

Préparer le matériel nécessaire à l'injection

Assurez-vous de disposer de toutes les fournitures et de tout le matériel dont vous aurez besoin.



Laver les mains

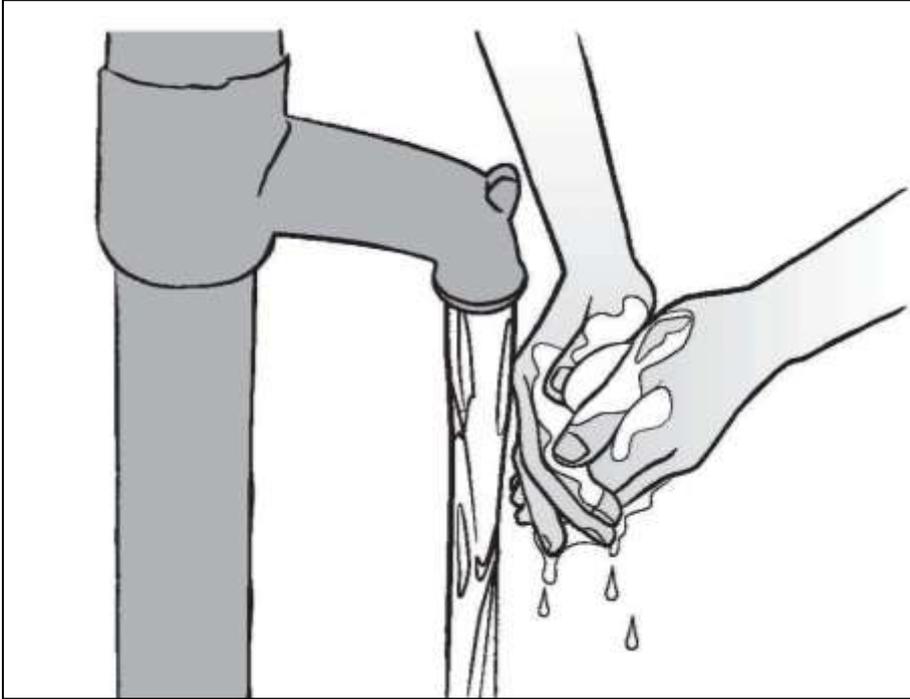


- Lavez-vous les mains après avoir préparé vos fournitures et avant d'administrer l'injection. Cela permet d'éviter l'infection.
- Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon.
- Faites sécher vos mains à l'air.

Sélectionner un site d'injection

Demandez à votre cliente quel site d'injection elle préfère:

dans la partie
postérieure du
bras

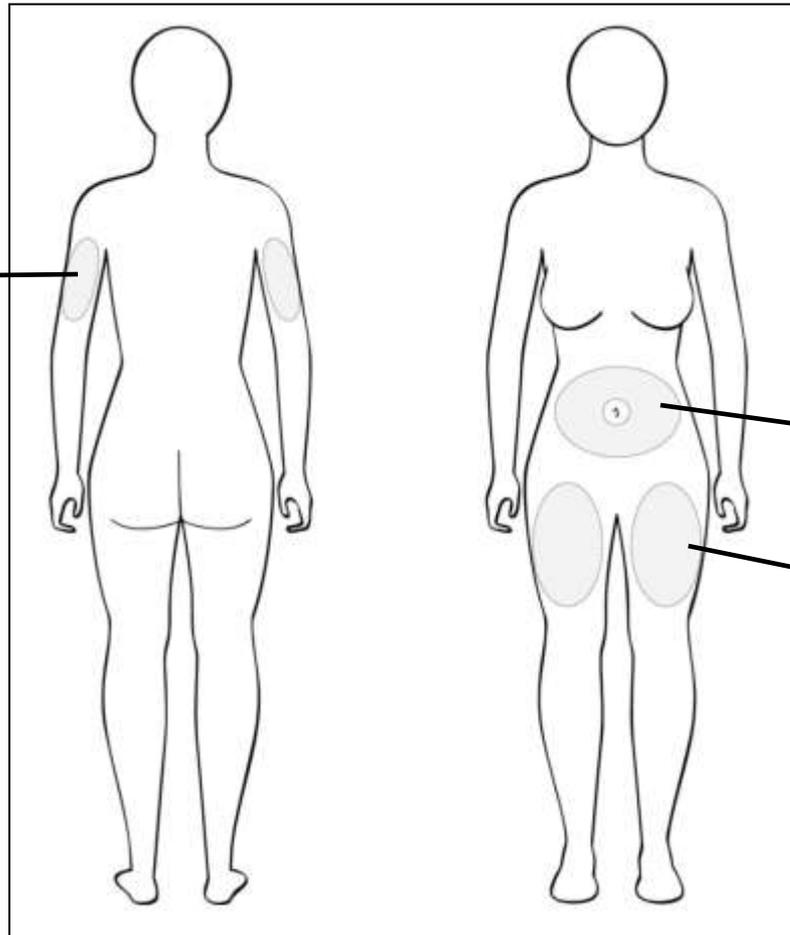

dans l'abdomen
(pas au nombril)

à l'avant de la
cuisse


Nettoyer le site d'injection si nécessaire




Si la partie de la peau où vous allez administrer l'injection est sale, nettoyez-la avec du coton imbibé d'eau propre.

Ouvrir le sachet


- Vérifiez la date d'expiration inscrite sur le sachet.
- Ouvrez le sachet et retirez l'Uniject.
- Assurez-vous qu'il est à température ambiante.

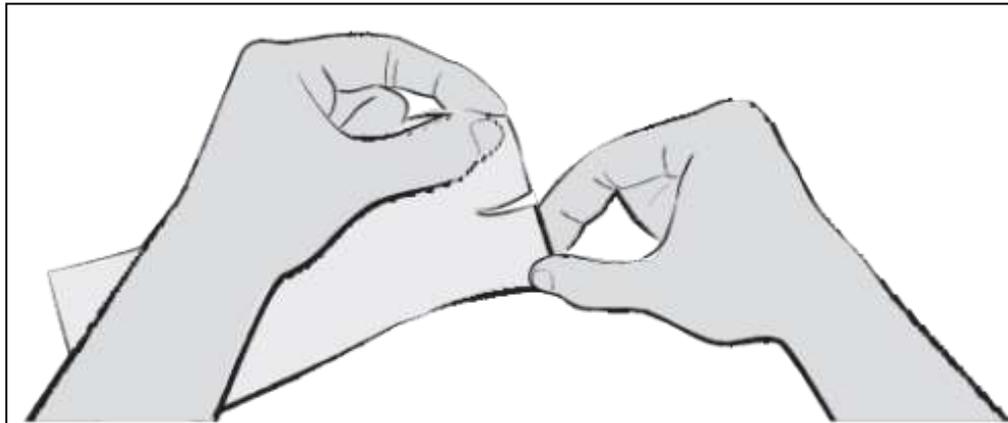


Revoyez les composantes de l'Uniject

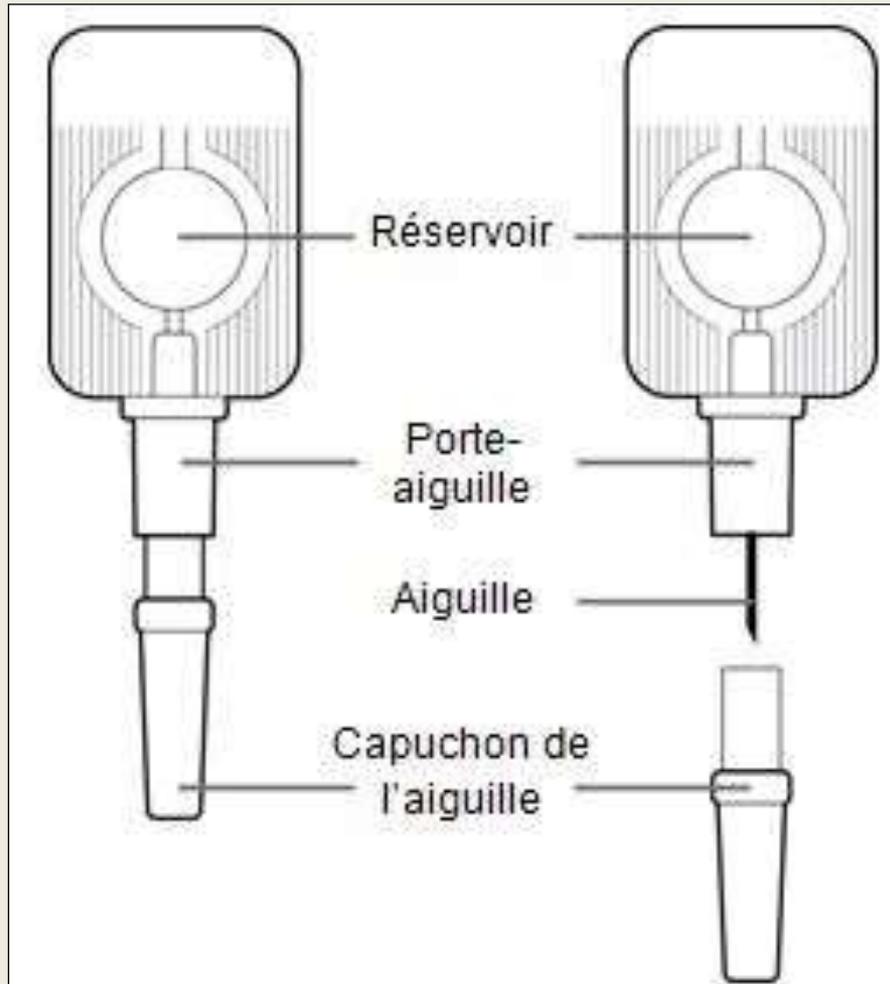

Mélanger la solution

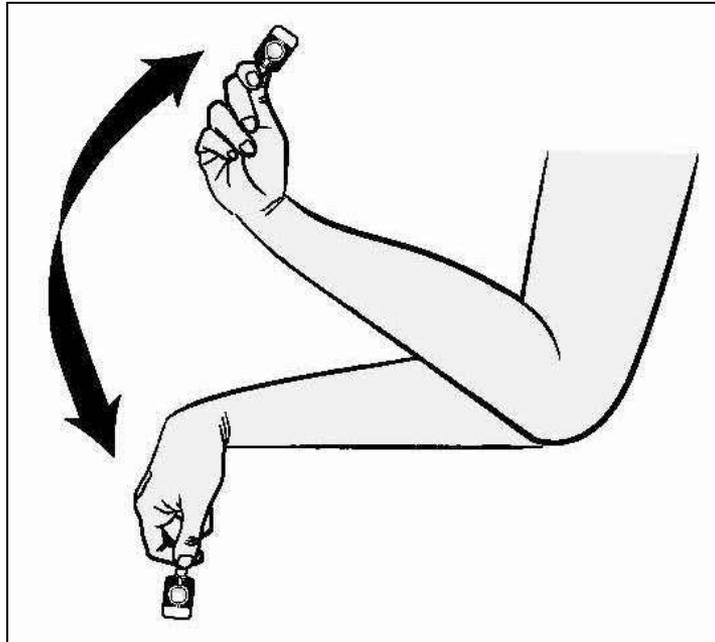


- Tenez l'Uniject par le porte-aiguille.
- Secouez-le vigoureusement pendant 30 secondes.

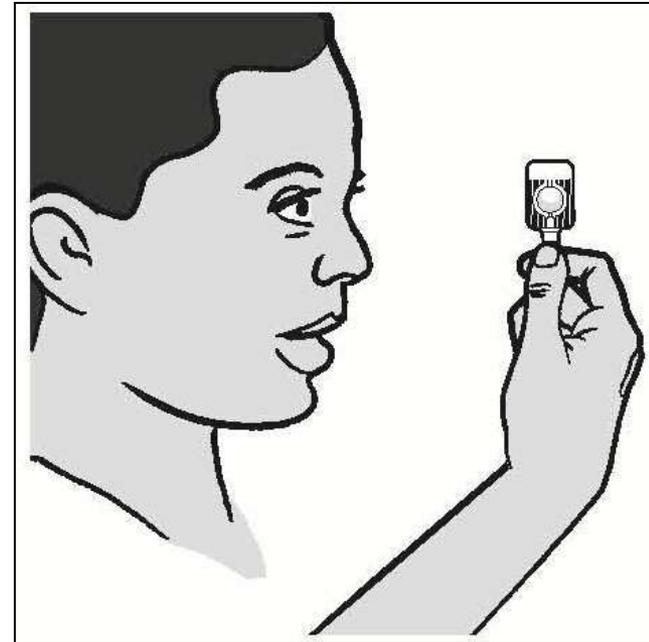


- Assurez-vous que la solution est bien mélangée et qu'il n'y a pas de cassure ou de fuites.

Activer l'Uniject

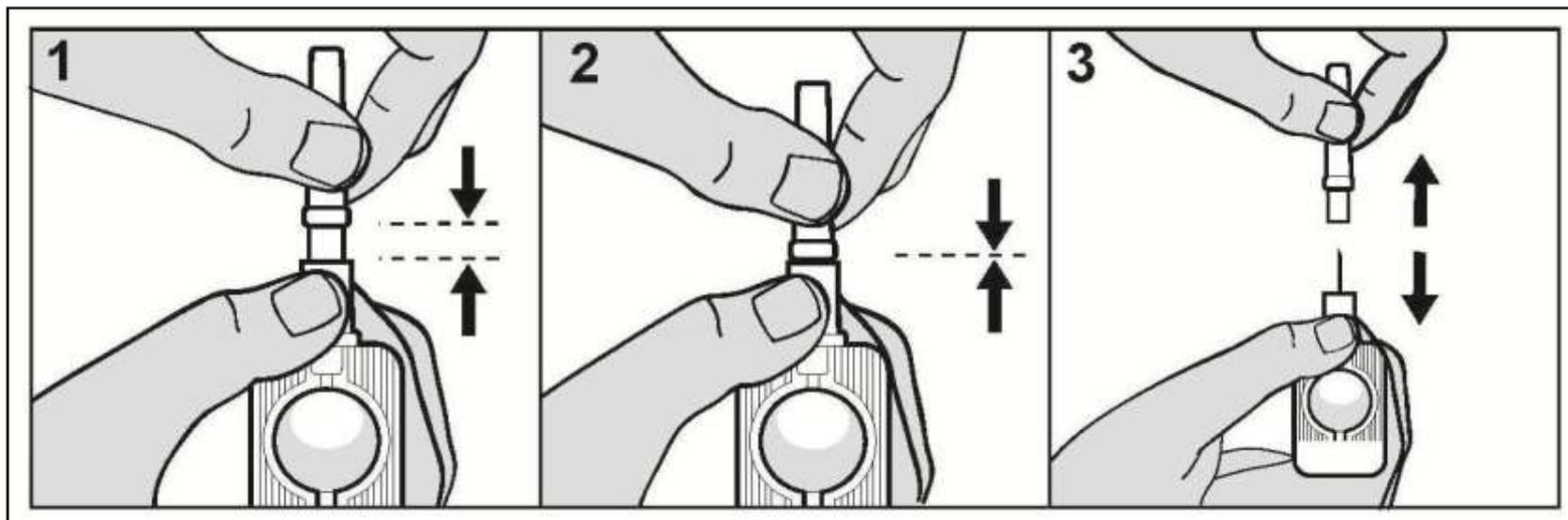

- Maintenir l'Uniject par le porte-aiguille.
- Orienter l'Uniject vers le haut lors de l'activation afin d'éviter des écoulements.
- Enfoncer fermement le capuchon de l'aiguille dans le porte-aiguille.
- Si l'espace n'est pas complètement fermé, vous ne pourrez pas presser le réservoir pendant l'injection.
- Enlever le capuchon de l'aiguille.


C'est quoi l'espace ?

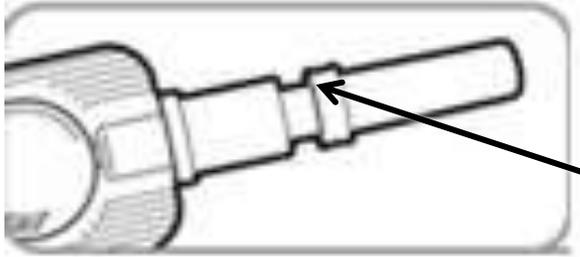

Dessin



Photographie

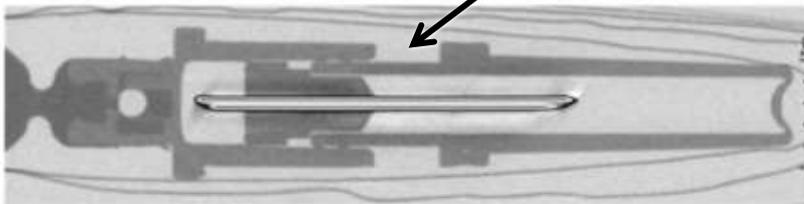

Intérieur de l'Uniject (radiographie)

Espace

Pourquoi est-il important de fermer complètement l'espace pendant l'activation ?




L'espace est fermé

Photographie

- L'aiguille est poussée à travers une barrière qui retient le DMPA.
- Le DMPA pénètre dans l'aiguille.
- **L'injection va marcher.**

L'espace est fermé

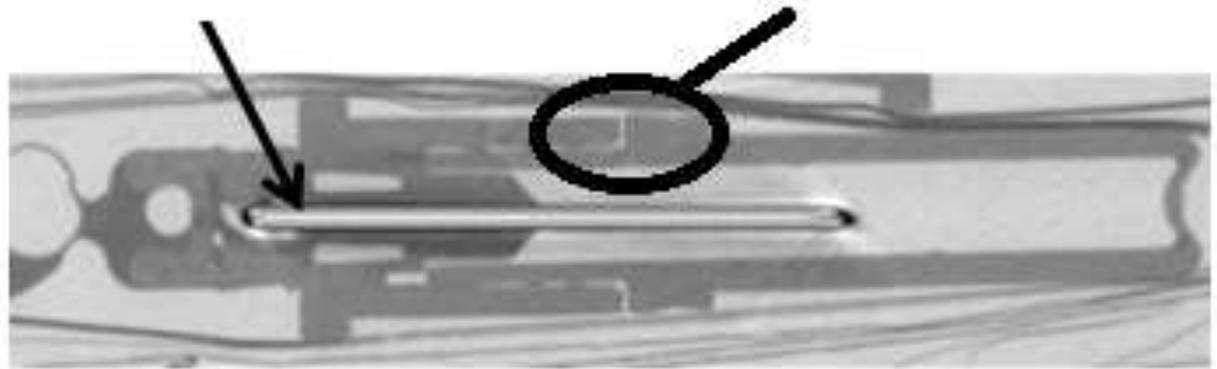

Intérieur de l'Uniject (radiographie)

Que se passe-t-il si l'espace n'est pas complètement fermé lors de l'activation ?




L'espace n'est fermé que partiellement.

Photographie


- L'aiguille n'est que partiellement insérée dans la barrière qui retient le DMPA.
- Le DMPA ne peut pas pénétrer dans l'aiguille.
- **L'injection ne va pas marcher.**

L'espace n'est fermé que partiellement.

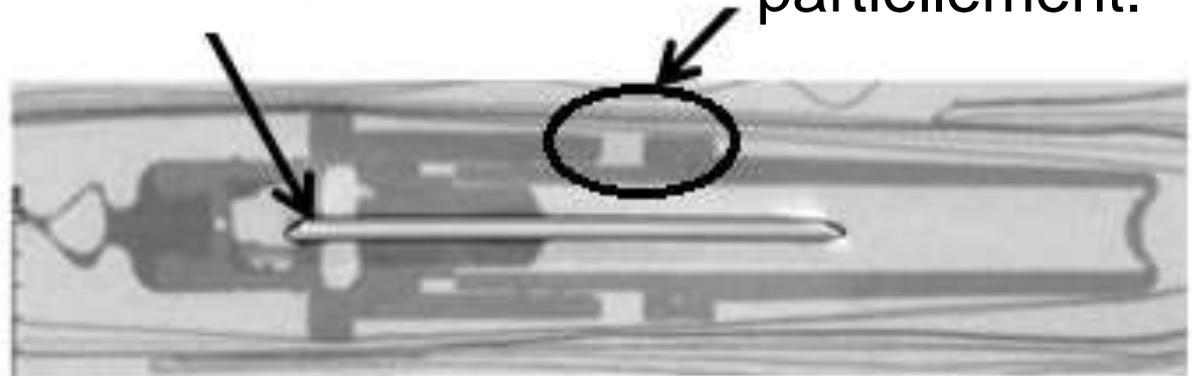

Intérieur de l'Uniject (radiographie)

Pincer doucement la peau au point d'injection

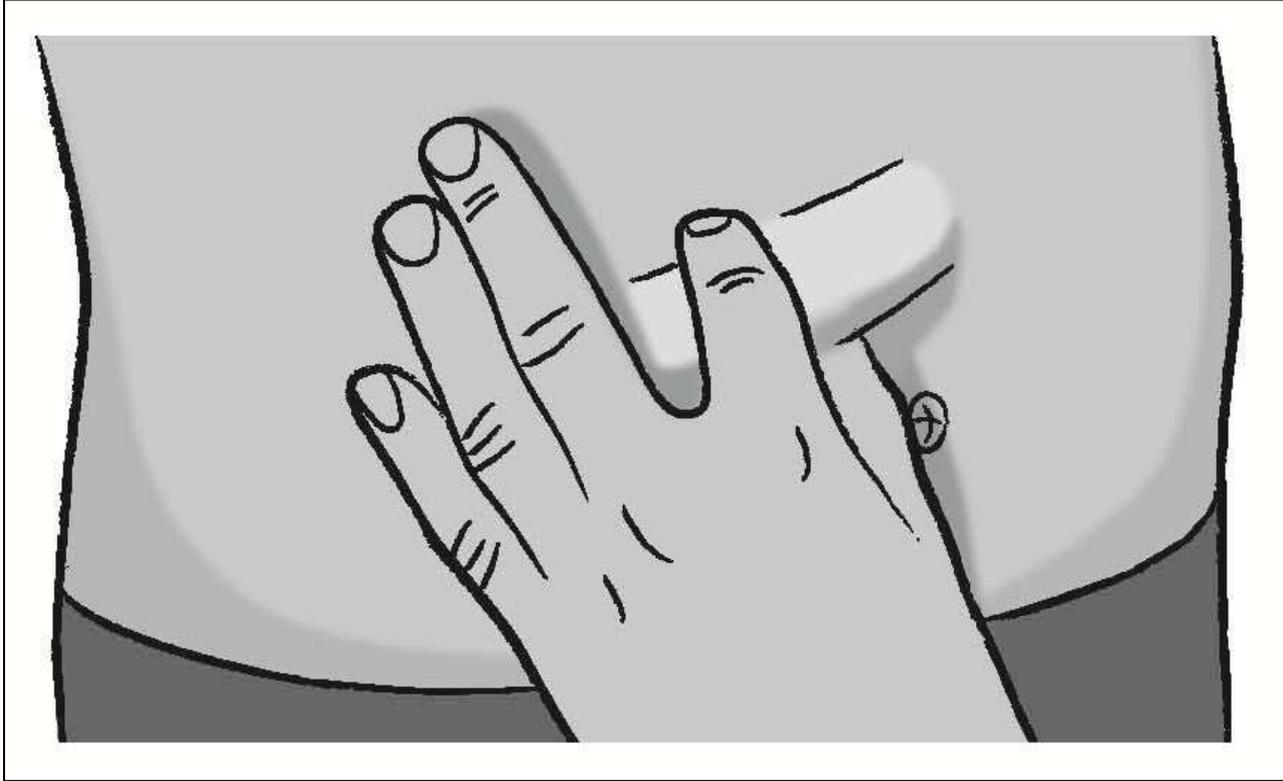

Le pincement a son importance car il permet de s'assurer que Sayana Press est injecté dans la graisse, et non dans le muscle.

Positionnement de l'aiguille pour l'insertion

- Insérez directement dans la peau par un angle orienté vers le bas.
- Un angle légèrement orienté vers le bas permet d'éviter l'injection d'air.
- L'aiguille ne doit jamais être pointé vers le haut lors de l'injection.




Insérer l'aiguille (bras)



- Tenir le porte-aiguille en insérant l'aiguille.
- Insérer avec un angle vers le bas.
- Le porte-aiguille doit toucher la peau.

Insérer l'aiguille (abdomen)

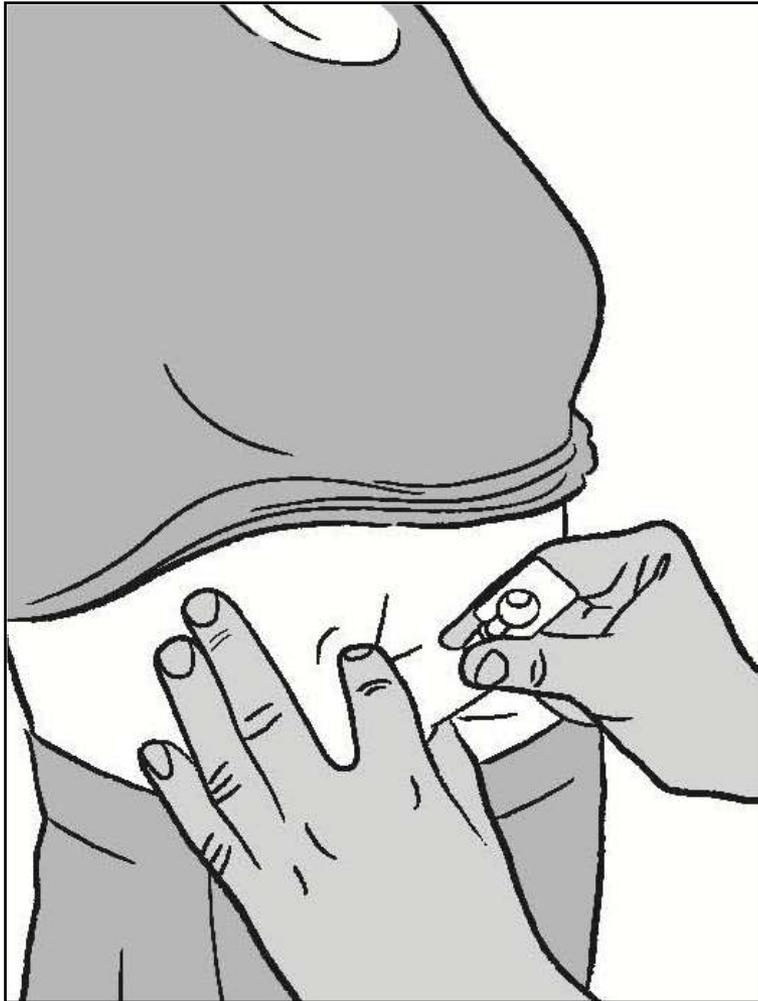


- Tenir le porte-aiguille en insérant l'aiguille.
- Insérer avec un angle vers le bas.
- Le porte-aiguille doit toucher la peau.
- **Eviter le nombril.**

Insérer l'aiguille (cuisse)




- Tenir le porte-aiguille en insérant l'aiguille.
- Insérer avec un angle vers le bas.
- Le porte-aiguille doit toucher la peau.

Presser le réservoir

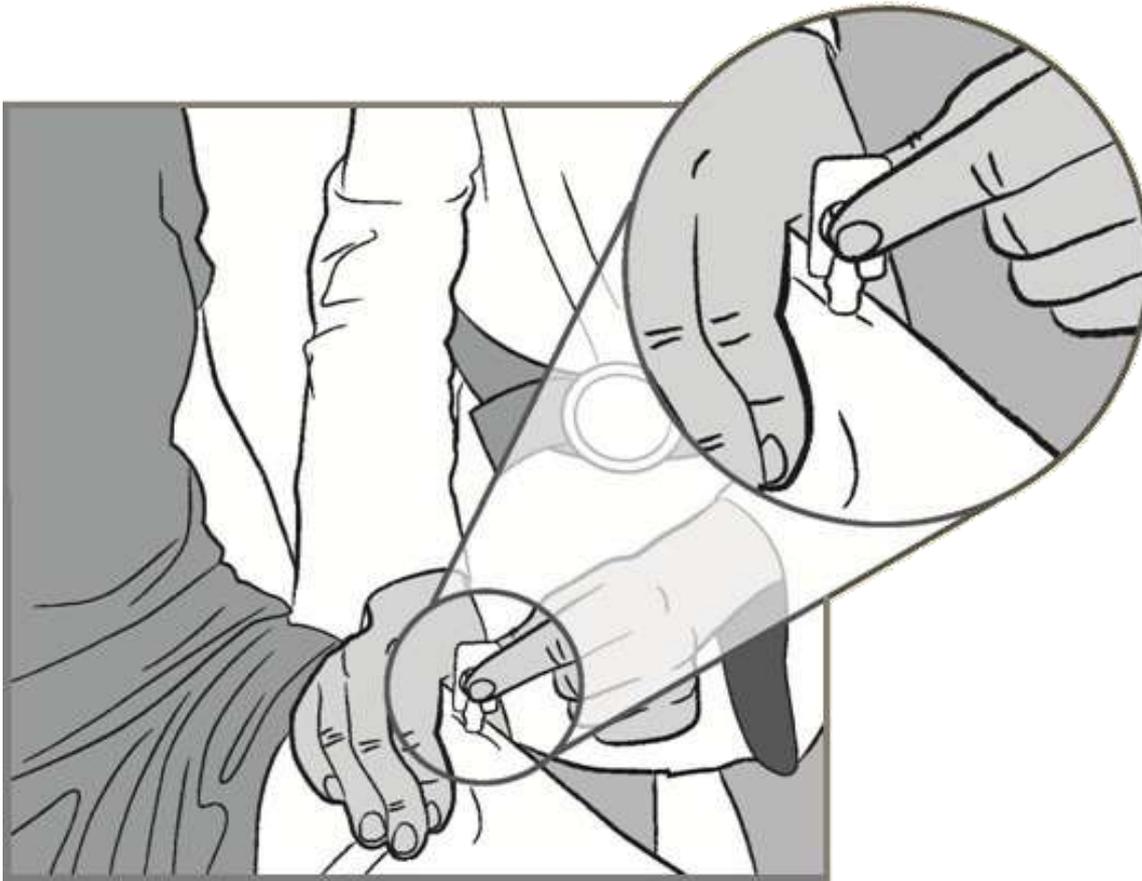


- Pressez le réservoir lentement—5 à 7 secondes.
- **Ne nettoyez pas** ou ne massez pas le site après l'injection.

Jeter l'Uniject

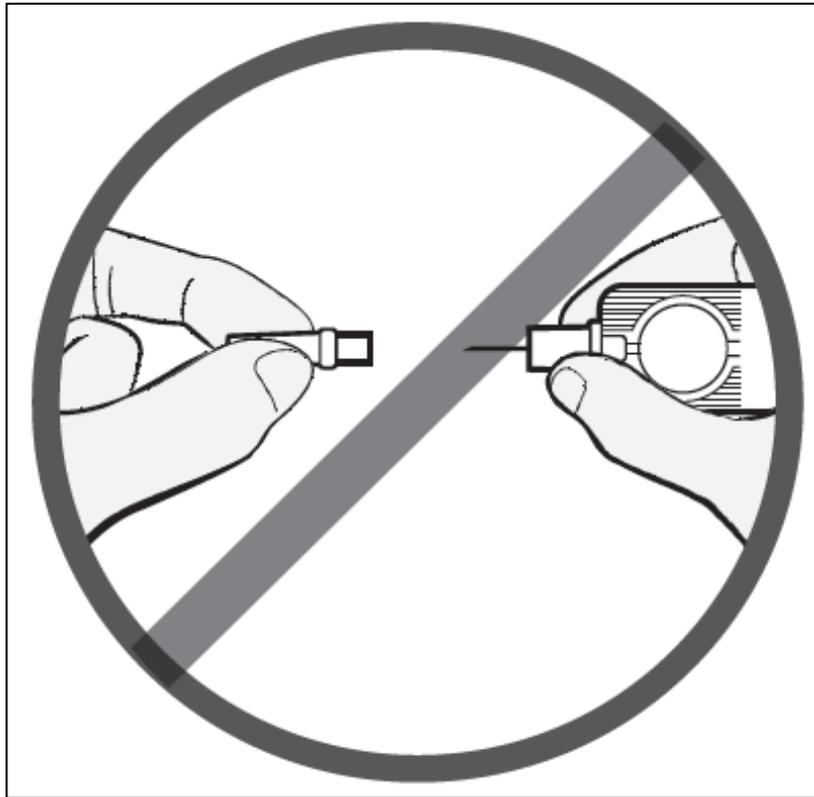

- Ne replacez pas le capuchon de l'aiguille sur l'Uniject.

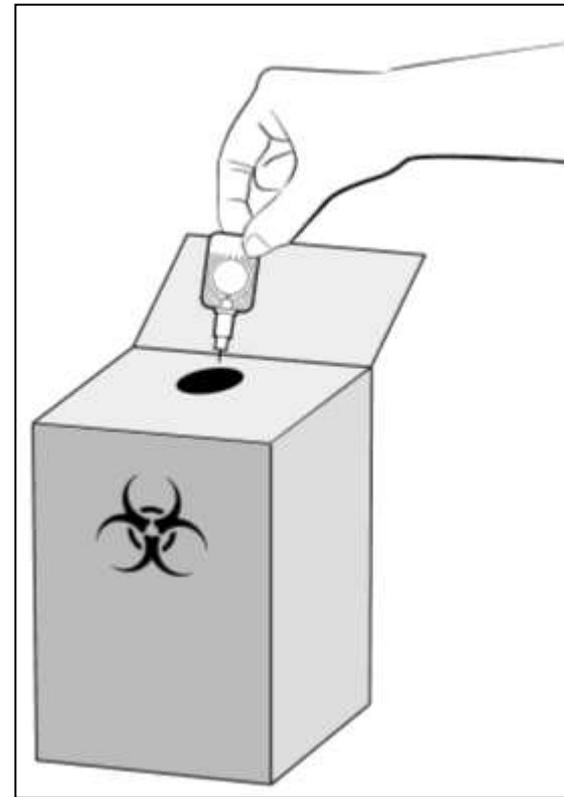

- Mettez dans une boîte de sécurité.

ACTIVITE DE GROUPE

Pratiquer l'injection sur les modèles

Suivez les instructions sur l'aide-mémoire « Aide-mémoire pour l'injection de Sayana Press »


POUR LES PRESTATAIRES QUALIFIÉS

Aide-mémoire pour l'injection de Sayana Press

Suspension de 104 mg/0,65 ml d'acétate de médroxyprogestérone dans le système d'injection Uniject™

ETAPE 1: Sélectionner le site d'injection

Sayana Press peut être injecté dans le partie supérieure de bras, dans l'abdomen (pas au nombril) ou à l'avant de la cuisse. Choisissez le site le plus approprié.

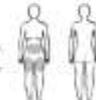


ETAPE 2: Ouvrir le sachet en plastique et en retirer l'Uniject

Vérifiez la date d'expiration.



ETAPE 3: Le système d'injection Uniject

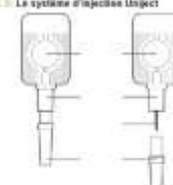


ETAPE 4: Mélanger la solution

- Tenir l'Uniject par le porte-aiguille et agiter vigoureusement pendant environ 30 secondes.
- Ne pas serrer l'Uniject.
- S'assurer que Sayana Press est homogène et qu'il n'y a pas de sédiments ni de filaments.
- Mélanger à nouveau le si c'est un ablatif avant d'administrer l'injection.



ETAPE 5: Activer l'Uniject

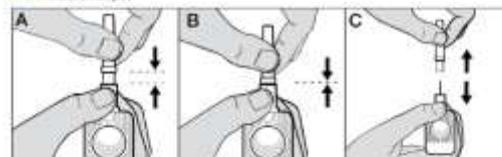

- Maintenir l'Uniject par le porte-aiguille.
- Orienter l'aiguille vers le haut lors de l'activation afin d'éviter des écoulements.
- Enfoncer fermement le capotillon de l'aiguille dans le porte-aiguille.
- Si l'écoulement n'est pas complètement fermé, vous ne pouvez pas presser le réservoir pendant l'injection.
- Retirer le capotillon de l'aiguille.

USAID **PATH**

ETAPE 6: Fixer légèrement la peau sus-jacent à l'injection

Cela aide aux "tirés" pour insérer l'aiguille.



ETAPE 7: Insérer l'aiguille à l'angle droit vers le bas

- Maintenir l'Uniject par le porte-aiguille et insérer l'aiguille dans la peau avec un angle droit d'un coup sec.
- Le porte-aiguille doit être parallèle avec la peau pour garantir l'insertion de la bague protectrice.



ETAPE 8: Presser le réservoir

- Viser le devant pas après.
- Presser lentement le réservoir (5 à 7 secondes).
- Ce n'est pas grave s'il reste un peu de médicament dans le réservoir.



ETAPE 9: Jeter l'Uniject


- Ne pas réutiliser le capotillon de l'aiguille.
- Jeter immédiatement et l'Uniject dans un récipient résistant à la perforation.



Copyright ©2015, Program for Population, Technology in Health (P2TH). Le contenu de ce document peut être utilisé librement à des fins éducatives ou non-commerciales, à la condition que le matériel soit accompagné d'une citation de reconnaissance.
Sayana Press est une marque déposée de Pfizer, Inc. Uniject est une marque déposée de BD.

ACTIVITE DE GROUPE

S'exercer à trouver le site d'injection

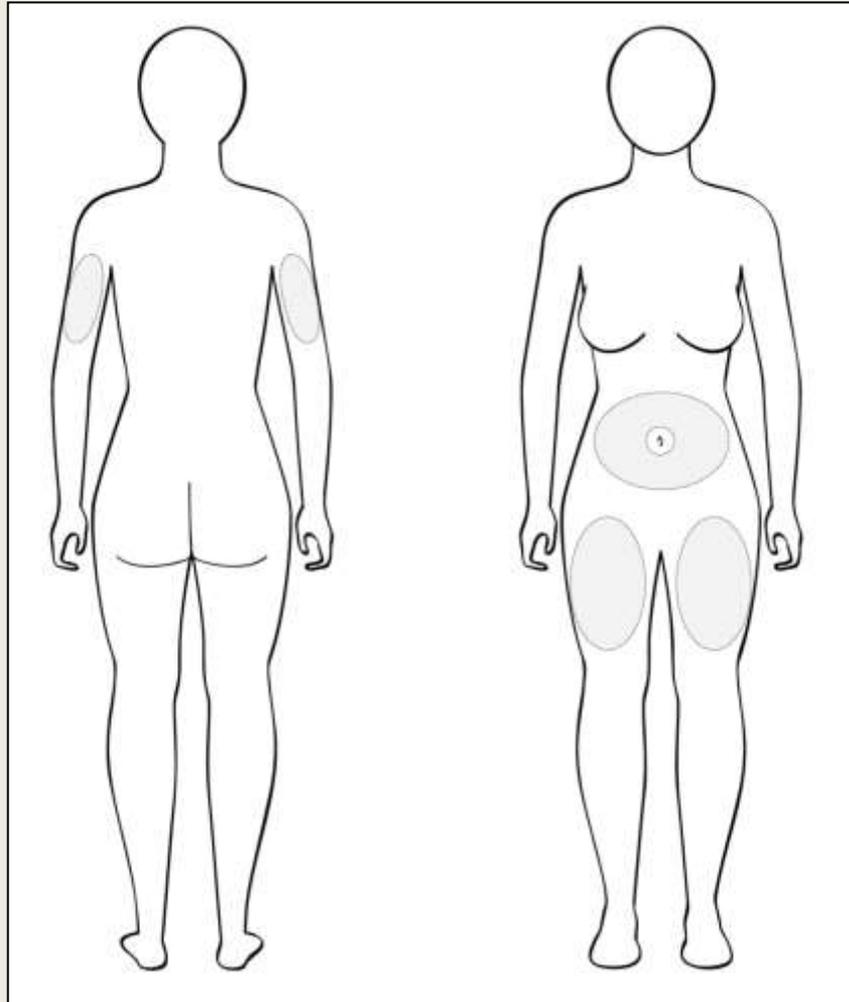

Administrer Sayana Press

Instructions:

- Choisissez deux volontaires.
- Montrez les trois endroits où une injection de Sayana Press peut être administrée.
- Avec un Uniject fermé, montrez là où l'aiguille sera insérée et comment elle va être inclinée.

Administrer Sayana Press

Instructions:

- Choisissez un volontaire.
- Décrivez le processus d'administration d'une injection avec Sayana Press tout en le montrant sur un bras d'injection d'essai.
- Reprenez la démonstration avec un autre volontaire.